

Så fungerar ”Smartklockan Bo”




Innehållsförteckning

1. Tillhörande delar	3
2. Knappar och inställningar	3
3. Starta smartklockan	4
4. Att ladda smartklockan	4
5. Hur larmar man?	5
6. Att ta emot samtal till klockan	6
7. Att ringa från klockan	6
8. Specifikationer & återvinning	7
9. Kontaktinformation	7

1. Tillhörande delar

1. Smartklockan Bo
2. Tillhörande laddare
3. Transformator

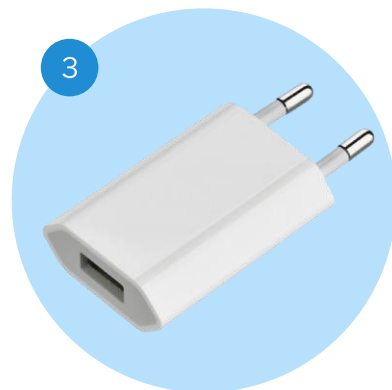

2. Knappar och inställningar



(Bild 1)

3. Starta Smartklockan

Klockan är förprogrammerad och klar att börja användas direkt vid leverans. Sätt på klockan genom att hålla inne knappen på vänster sida om klockan (hädanefter kallad ”Knappen”, då detta är den enda fysiska knappen) tills Sensorems logga visas (ca 5 sekunder).

Rekommendation!



Ha alltid klockan påslagen, trygghetstjänstens funktioner fungerar inte när klockan är avstängd. Klockan är dessutom vattentät och kan bäras överallt (dock ej längre simturer).

- Väl påslagen är displayen svart i standbyläge. Displayen tänds genom att trycka en gång på **”knappen”**, då visas den aktuella tiden i analog form. Tryck därefter en gång på skärmen för att komma till huvudmenyn (Bild 1). Skärmen släcks alltid per automatik efter ca 25 sekunder.

4. Att ladda smartklockan

- Starta och ladda Smartklockan Bo genom att placera metallkontakterna (på tillhörande laddare) på klockans baksida. Magnetremsan ”dras” automatiskt mot laddkontakten. Om du sätter den åt ”fel” håll kommer laddkontakten stöta ifrån klockan, och det är därför tydligt om du har fäst klockan på rätt sätt.
- Klockans batteritid är cirka 3 dagar beroende på användning. När 20% batteritid återstår plingar och vibrerar klockan till för att indikera att klockan bör laddas. Att ladda klockan tar cirka 2-3 timmar, och det går givetvis även att larma från klockan medan laddning pågår.



När du ansluter laddaren står det på displayen *”Laddaren är ansluten!”*. Laddsymbolen i displayens högra hörn visar om klockan laddas.



5. Hur larmar man?

- Larmet fungerar att aktivera överallt, oavsett om klockan är i "standbyläge", eller i huvudmenyn. För att aktivera larmet, tryck och håll in **"knappen"** i ca 3-5 sekunder, därefter släpp knappen. Användaren får en tydlig återkoppling att larmet går iväg genom texten på klockans display "SOS Samtal" - klockan ringer upp larmnumret (Bild 2). Följande flöde sker därefter:



(Bild 2)

1. Samtliga fördefinierade anhöriga får notiser i sina mobiltelefoner om larmet, och dessa får även användarens GPS position uppdaterad i Sensorems app. OBS: Användarens aktuella GPS position i appen visas alltid i samband med ett larm, men uppdateras även med viss regelbundenhet när larmet inte används.
2. Samtidigt ringer klockan per automatik upp de fördefinierade anhöriga i önskad ordningsföljd, exempelvis "Pelle", "Kalle" och "Lisa". Om "Pelle" inte svarar/telefonen avstängd ringer klockan per automatik upp "Kalle", följt av "Lisa". Om ingen av dessa svarar ringer klockan upp samtliga anhöriga en andra gång. Om ingen är anträffbar den andra gången kopplas samtalet vidare till ett larmnummer/central som bemannas av Sensorem AB, som då agerar på larmet (öppet dygnet runt).

Trygghet i vardagen!



Vetskapen om att någon alltid mottar och vet användarens GPS position vid larmet, och därmed kan agera (anhörig eller Sensorem AB) ska inge trygghet - både för användaren och dess anhöriga. Om du vill ändra antalet anhöriga och/eller dess ordningsföljd, vänligen kontakta Sensorems support.

6. Att ta emot samtal till klockan

- I välkomstbrevet står vilket telefonnummer som klockan tilldelats. Telefonnummer (från operatör Telenor Sverige AB) är ett ”vanligt” mobiltelefonnummer som du kan ta emot samtal ifrån när som helst.
- När någon anhörig ringer till klockan spelas en melodislinga upp i enheten (kombinerat med vibration), så att användaren av klockan tydligt hör att någon ringer. Du som användare av klockan svarar enkelt genom en stor grön knapp på displayen som lyser (Bild 3).



(Bild 3)

7. Att ringa från klockan

- Användaren kan även ringa från klockan till dess anhöriga var och när som helst utan att det är ett ”larm” (likt en mobiltelefon). Detta görs genom att a) kort tryck på **”knappen”** följt av b) kort tryck på displayen tre gånger (huvudmeny, telefonbok, kontaktlista). I användarens kontaktlista finns per automatik sparad dess anhöriga som definierats i samband med köpet av tjänsten. Om du vill lägga till ytterligare kontakter i kontaktlistan, vänligen kontakta Sensorems support. För att åter komma tillbaka till huvudmenyn, tryck alltid på cirkelknappen på displayen.
- OBS: Funktionen ”Att ringa från klockan” är tillgänglig i de fall du valt klocktypen *fullständiga versionen*.

8. Specifikationer och återvinning

Storlek	49,5 x 41 x 15,5
Batterikapacitet	750mAh
Vikt	47g
Batteritid	3-4 dagar
IP klass	IP67
Kommunikation	GSM (850,900,1800,1900)
Position	GPS, AGPD, LBS, WIFI



Produkten måste kasseras separat från övriga hushållssopor. Vänligen kassera produkten efter slutet av livslängden bland utrustning avsedd för elektronisk utrustning.

9. Kontaktinformation

Sensorem AB

Östermalmsgatan 26A
11426 Stockholm



E-mail: support@sensorem.se

Tel växel: +46 8 46 00 77 00